


decakila



KMTT038W
CANTARE CORP

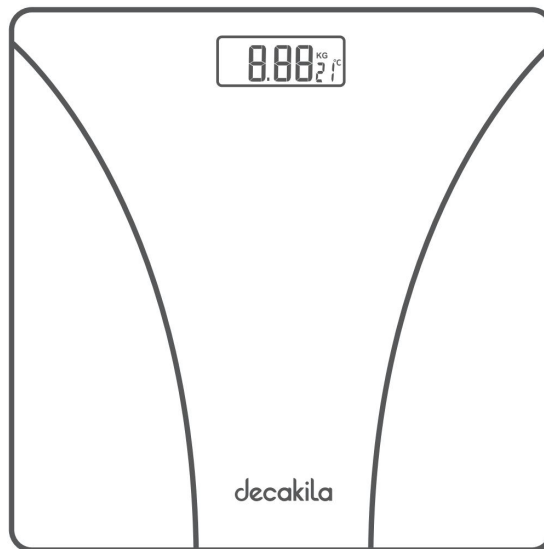

Noul dumneavoastră cântar electrortric a fost proiectat pentru a indica cu exactitate creșterea sau pierderea în greutate într-o perioadă de timp și ar trebui să ofere mulți ani de funcționare în condiții normale de utilizare.

SPECIFICAȚII

- Baterie: 2 x 1,5 V (7# Litiu) / 1 x 3V CR2032 LI
- Echipat cu un sistem de senzori de tensiune de înaltă precizie
- Capacitate: 180kg 396LB
- Gradul: 100g/0.2LB
- Mini eficient: 7kg
- Mod greutate: cântărire automată
- Resetare automată la zero
- Oprire automată
- Unitate: Kg/lb
- Simbol Lo boot detecție joasă tensiune, joasă tensiune
- Sugestie: o-Ld
- Hiny of gres: ---
- Sensor deteriorat sau afișaj întrerupător: LCER

APĂSAREA TASPTELOR

- Funcții cheie: •
Comutator de conversie a unității
- Program pentru a încălca comutatorul

CUM SE CĂREȘTEAZĂ

Îndepărtați folia izolatoare, puneți cântarul pe o suprafață tare și plană (evitați covorul de suprafață moale), așteptați. 2 secunde înainte de cântărire.

Configurați unitatea înainte de utilizare, unitatea nu poate fi convertită când greutatea. Stați pe cântar în echilibru, puteți citi rezultatul automat când greutatea este setată după 3 secunde și puteți opri automat după 8 secunde.

- Notă: Înainte de a pune cântarul pe suprafața plană și tare, cântarul se oprește automat, mai întâi trebuie să cântăriți automat.

SFATURI DE UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIREA

- Când nu este utilizat, cântarul trebuie lăsat descărcat pentru a evita supraîncărcarea asumarea puterii și eșecul lucrului.
- Încercați să stați la mijloc pentru a evita alunecarea.
- Stați pe cântar într-un echilibru bun pentru a evita defectarea blocării și ilustrarea incorectă.
- Nicio lovitură puternică în cântar.
- Nu lăsați pete de apă pe loc sau spălați cu apă.
- pe termen lung nu trebuie când, vă rugăm să-l scoateți.
- Acest articol este folosit doar pentru cântărire în viața de zi cu zi. Nu face utilizare pentru comerțul legal.



Păstrați-l departe de apă și nu îl
spălați cu apă





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com

UNIWISDOM TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD



Fabricat în China No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China